


FIRSTSAVE® AED G3

automatisierter externer Defibrillator

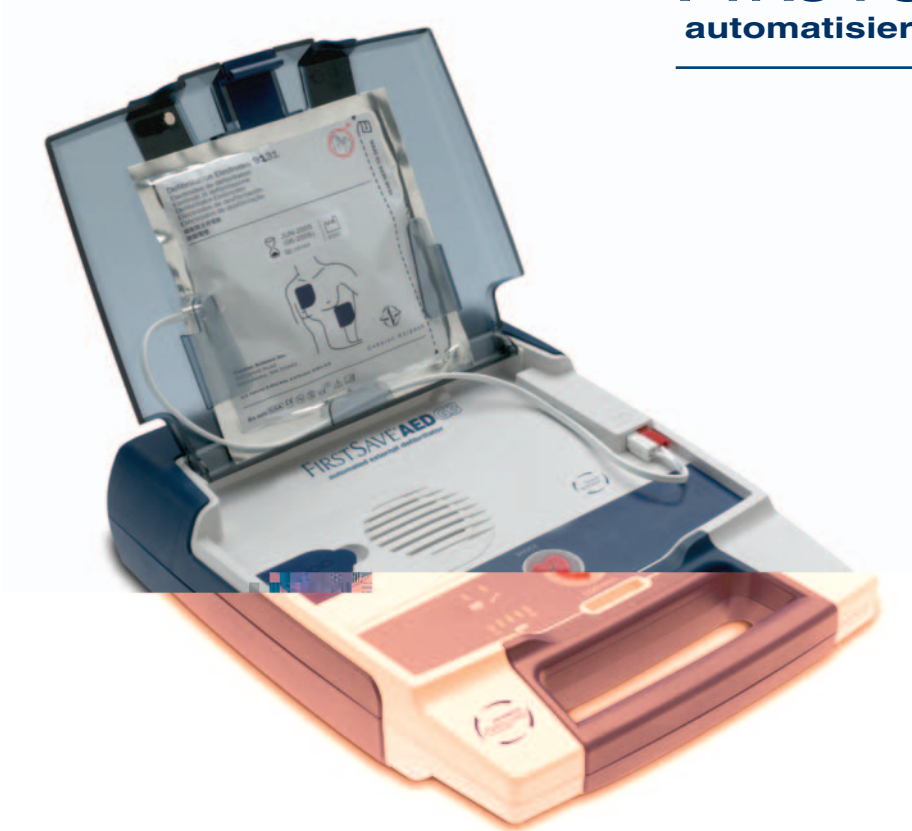

WIR PRÄSENTIEREN DEN FIRSTSAVE AED G3 VON CARDIAC SCIENCE TECHNIK UND LEISTUNG ... IN EINEM DESIGN, DAS SEIN GELD WERT IST

Die nächste Generation des FirstSave AED ist da. Technik und Leistungsfähigkeit – der FirstSave AED G3 bietet Kunden unsere führende AED-Technik in einem Design, das sein Geld wert ist. Der neue FirstSave AED von Cardiac Science bietet Ihnen:

- Einfache, anwenderfreundliche Bedienung mit einer Taste
- Patentierte Technik, die täglich, wöchentlich und monatlich Selbsttests durchführt
- Instruktivere gesprochene Anweisungen, die den Anwender durch die lebensrettende Maßnahme führen
- Hervorragende Qualität und Unmissverständlichkeit der gesprochenen Anweisungen
- Leichtgewicht in neuer, anwenderfreundlicher Form

Der FirstSave AED G3 enthält außerdem die hochentwickelten Technologien unseres Unternehmens wie die patentierte Analysesoftware RHYTHMx® und die zweiphasige Defibrillationswellenform STAR®. Branchenführende Technik und Leistungsmerkmale in einer anwenderfreundlichen Form zu einem angemessenen Preis ebnen den Weg für die nächste Generation von AEDs von Cardiac Science.

Um mehr über die Spitzenauswahl an AEDs zu erfahren, besuchen Sie unsere Website www.cardiacscience.de oder schreiben Sie eine E-Mail an info@cardiacscience.de



DEFIBRILLATOR

Bedienung	Automatisiert
Wellenform	Biphasische, abgeschnittene Exponentialwellenform
Energie	Variable Energie, aufsteigend (105J bis 360J)
Schock-Zykluszeit	Weniger als 55 Sekunden für eine Serie von drei Schocks
Bedienelemente	Bedienung mittels eine Taste
Gesprochene Anweisungen	Umfassende gesprochene Anweisungen leiten den Anwender durch den Rettungsprozess
Sichtbare Anzeigen	Batterieladeanzeige SmartGauge®, Wartungsanzeige, Elektrodenanzeige
Akustische Signale	Gesprochene Anweisungen, Aufladeten, Systemwarnung
Synchronisierter Schock	Integrierte automatische Synchronisation
Herzschrittmacher-impulserkennung	Ja
Programmierbar	Nein
Eignung für Kinder	Ja

ELEKTRODEN

Minimale gemeinsame Oberfläche	228 cm ²
Volle Kabellänge	1,3 m
Lieferzustand	Selbsttestend, bereits an den AED angeschlossen
Typ	Für Erwachsene, bereits gegelt, selbstklebend, Einwegelektroden, nicht polarisierte Defibrillationselektroden (identische Pads können in jeder der beiden Positionen angebracht werden)
Haltbarkeit	2 Jahre vom Produktionsdatum

BATTERIE

Typ	IntelliSense® Lithium
Garantie	1 Jahr, voller Ersatz

AUTOMATISCHE SELBSTTESTS

Täglich	Batterie, Vorhandensein der Elektroden, interne Elektronik, keine Aufladung, SCHOCK/WEITER-Taste und Software
Wöchentlich	Batterie, Vorhandensein der Elektroden, interne Elektronik, teilweise Aufladung, SCHOCK/WEITER-Taste und Software
Monatlich	Batterie, Vorhandensein der Elektroden, interne Elektronik, vollständige Aufladung, SCHOCK/WEITER-Taste und Software

EREIGNISAUFZEICHNUNG

Typ	Interner Speicher
Interner Speicher	34 Minuten EKG-Daten mit Ereignisvermerk
Datenaufwurf	Einsehbar über PC mit RescueLink® Software
Anschlüsse	Serien- oder USB-Port für PC mit Windows
Uhrensynchronisation	Synchrone Zeitaufzeichnung der Rettungsmassnahme

ABMESSUNGEN

Höhe	8 cm
Breite	27 cm
Tiefe	31 cm
Gewicht	3.1 kg

Bestellinformation

MODEL

9300C-208

BESCHREIBUNG

Automatisierter externer Defibrillator FirstSave AED G3

Jedes AED-Paket umfasst: (1) Defibrillator, (1) IntelliSense-Lithiumbatterie (9143), (1) Paar Defibrillationselektroden und (1) Quick Start Tool-Set enthält: Quick Start Guide, CD-ROM mit AED-Handbuch, Trainingsvideo, RescueLink und Serienanschlusskabel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Cardiac Science unter:

US/Kanada Bestellannahme:

Telefon: +1.800.991.5465
 Fax: +1.949.851.4418
 Email: aedorders@cardiacscience.com

US/Kanada Kundendienst:

Telefon: +1.888.466.8686
 Fax: +1.949.851.4425
 Email: aedsupport@cardiacscience.com

Internationale Bestellannahme:

Telefon: +45.4438.0500
 Fax: +45.4438.0501
 Email: sales@cardiacscience.dk

Internationaler Kundendienst:

Telefon: +45.4438.0539
 Fax: +45.4438.0501
 Email: service@cardiacscience.dk



CARDIAC SCIENCE

Nasdaq: DFIB

1.800.991.5465

WWW.CARDIACSCIENCE.COM

EMAIL: AED@CARDIACSCIENCE.COM

Firmenhauptsitz

1900 Main Street, Suite 700, Irvine, CA 92614 USA
 Telefon: +1.949.797.3800 Fax: +1.949.951.7315

Cardiac Science (U.K.) Ltd.

Unit 13, Crown Industrial Estate, Canal Road, Timperley
 Altrincham, Cheshire, WA14 1TF, England
 Telefon: +44.161.926.0000 Fax: +44.161.926.0002

Filiale Minnetonka

5474 Feltl Road, Minnetonka, MN 55343 USA
 Telefon: +1.952.939.4181 Fax: +1.952.939.4191

Cardiac Science Deutschland GmbH

Blasewitzer Str. 41, 01307 Dresden, Deutschland
 Telefon: 0.800.186.0630 Fax: 0.800.181.6596

Internationale Filiale

Kirke Vaerloesevej 14, DK-3500 Vaerloese, Dänemark
 Telefon: +45.4438.0500 Fax: +45.4438.0501

